



TechniCare

Nascentia™



Verlosbed Nascentia

Comfort, gebruikersgemak en ergonomie in één verlosbed

Comfort en ergonomie voor de moeder, gebruiksgemak voor de arts en verpleegkundige. Dat is het Nascentia verlosbed.

*“Een unieke
combinatie van
een verlos- en
verpleegbed”*

Arjan van de Voorde,
Oprichter TechniCare



Verlosbed Nascentia

Het Nascentia verlosbed is een comfortabel volwaardig verpleeg- en verlosbed, waardoor het bed dé keuze is voor de kraamsuite. De zwangere, barende en kraamvrouw maken gebruik van één en hetzelfde bed. De Nascentia heeft het gebruiksgemak van een volwaardig verlosbed, waarbij met alle baringshoudingen rekening is gehouden.

Het bed functioneert in één handeling als dwarsbed, door het voeteneinde, de partuskruk, los te koppelen. Deze is te gebruiken voor diverse baringshoudingen of de arts of verloskundige gebruikt deze als stoel.

Ergonomie



Het Nascentia verlosbed is een ergonomisch bed, gericht op comfort en het voorkomen van rugklachten. Zowel voor de moeder, maar ook voor het verplegend personeel en artsen. Het Nascentia verlosbed is eenvoudig door één persoon te besturen, ook met patiënt, dankzij stuurwielen welke in het midden van de Nascentia zijn geplaatst. Daarmee is een draaicirkel, op de plaats, van 360 graden mogelijk.



Functionaliteiten

Het Nascentia verlosbed kenmerkt zich door haar gebruiksgemak. Het verstellen van de hoogte, het afstellen van de beensteunen, alles is eenvoudig te bedienen. Het Nascentia verlosbed bezit de volgende functionaliteiten:

Comfort zoals het hoort

- Het foam matras is speciaal ontwikkeld voor het verlosbed en biedt de moeder tijdens en na de bevalling het gewenste comfort. Het matras heeft een dichtheid tot 50kg/m³.

Daadwerkelijk gebruiksgemak

- Accessoires en opties zijn intuïtief te bedienen en te gebruiken.
- De Nascentia is voorzien van een accu, waardoor u het bed kunt bedienen zonder aansluiting op het stroomnet.
- Dankzij de positionering van de wielen bezit het bed een draaicirkel van 360 graden en bedient één verpleegkundige het gehele bed.





Opgeruimde omgeving

- Geen losse afneembare stukken of opties te installeren. Elke optie en accessoire is geïntegreerd aan het bed.
- Beensteunen geïntegreerd onder het bed.

In hoogte verstelbaar

- Zowel het bed als geheel, als de partuskruk los, zijn in hoogte verstelbaar.



CPR functie

- In geval van reanimatie gebruikt u de CPR functie voor een snelle gasveer gecontroleerde vlakking van het bed.

Afzonderlijk van elkaar te bedienen onderdelen

- De diverse onderdelen, het kopstuk, het bekken kantel gedeelte (Pelvic section) en de partus kruk zijn afzonderlijk bedienbaar. Zo garandeert het Nascentia verlosbed de optimale stand in elke fase van de bevalling.



Afneembare partuskruk

- De Partuskruk is afkoppelbaar en te gebruiken als stoel voor de arts of verpleegkundige. De partuskruk is zowel apart bedienbaar met handbediening als in combinatie met het verlosbed.



Veiligheid

- Dankzij de speciaal ontwikkelde kolommen biedt het bed veel stabiliteit en stevigheid voor patiënt en verplegend personeel.



*“Ik beveel de
Nascentia van harte
aan. Met name
het eenvoudig
ontkoppelen van de
partus kruk is voor
ons heel handig”*

Afdelingshoofd verloskunde,
Ziekenhuis in België

Baringshoudingen



1. Troonpositie



2. Zijligging



3. Lithotomie



4. Gekniel



5. Trendelenburg



6. Zittend



Hygiëne

Infectiepreventie is een groot issue binnen de zorg. Vanzelfsprekend heeft TechniCare gedurende de ontwikkeling nauwgezet rekening gehouden met de richtlijnen omtrent infectiepreventie.



Het verlosbed is eenvoudig te reinigen. Keuzes in materialen en vormen zijn gemaakt met het oog op infectiepreventie. Het matras bezit een wasbare polyester hoes, met PU coating; deze laat geen vloeistoffen door.

Het foam matras heeft een wasbaar polyester hoes met PU coating. Door de elastische en ademende eigenschappen is het comfort gewaarborgd. Het matras voldoet aan de Europese standaarden EN1021-1/2 en EN5971/2.



***“Het ideale bed
bestond niet.
Dus besloten we
het zelf te laten
ontwikkelen”***

Tiba Spaapen,
Afdelingsleider OLVG

Ontwikkeling



Het verlosbed is ontwikkeld in samenspraak met diverse ziekenhuizen en gerenommeerde leveranciers. “Het ideale bed bestond niet. Dus besloten we het zelf te laten ontwikkelen”, aldus Tiba Spaapen, afdelingsleider binnen het OLVG. (Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Amsterdam) “Er moest één bed komen, prettiger voor de kraamvrouw én voor de medewerkers aan het bed.” Met de ontwikkeling van de Nascentia is hier volledig aan gedacht.

Healing Environment


Het verlosbed is ontwikkeld aan de hand van het Healing Environment Concept; voor een aangepaste omgeving ter bevordering van het welzijn van de moeder. Door een rustgevende omgeving te creëren leidt dit tot stressvermindering bij zowel patiënt alsook familie.





Afstands-
bediening

Stevige
handgrepen

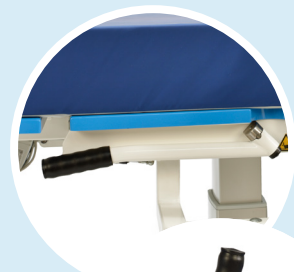

Papegaai
incl.
triangel



Verstelbaar
bekken
kantel
gedeelte



2 infuuspalen



Beensteunen



Katheterzakhaak



Eenvoudig 360°
te draaien



Accessoires

- **Uniek:** elektrische aandrijving
- Bed(nacht)verlichting
- Handgrepen
- 1 extra infuuspaal
- Afstandsbediening
- V-Cut matras



TechniCare levert voor u custom made accessoires. Informeer bij uw contactpersoon voor de mogelijkheden.

Kleuren



Technische specificaties

Lengte:	230 cm
Breedte:	103 cm
Matras lengte:	200 cm
Matras trapezium vorm:	75 – 90 cm
Matras breedte:	90 cm
Matras dikte:	14 cm
In hoogte verstelbaarheid:	60 – 100 cm
Verstelbaarheid rugleuning:	max. 80°
Verstelbaarheid	
bekken kantel gedeelte:	0 – 15°
Lift capaciteit bed:	250 kg
Lift capaciteit partus kruk:	200 kg (losgemaakt)
Trendelenburg positie:	tot 15°
Wielen:	15 cm

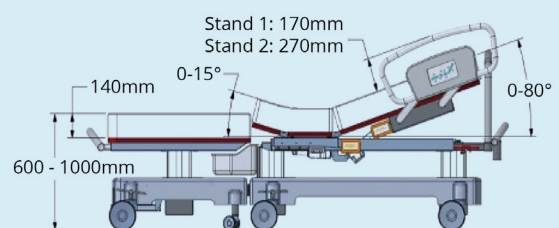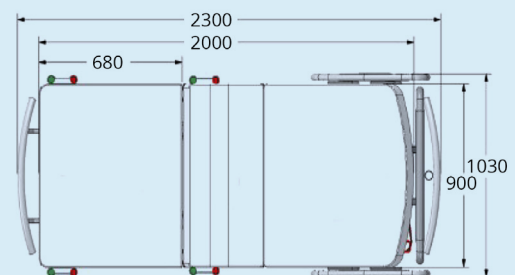

Bel één van onze adviseurs: +31 (0)85 087 04 21

Improving Healthcare

TechniCare heeft de ambitie de zorg te verbeteren door het leveren van technische innovatie.

TechniCare levert hoogwaardige kwaliteit producten, ontwikkeld in samenwerking met de eindgebruiker.

We zijn een Nederlands bedrijf met eigen ontwikkel en productie faciliteiten. Voor meer informatie:

www.technicare.nl



TechniCare
Improving Healthcare

Nikkelstraat 24
2984 AM Ridderkerk

T +31 (0)85 087 04 21
info@technicare.nl

www.technicare.nl