

Intuitieve en efficiënte zorg: een beter resultaat.



Hill-Rom

Enhancing Outcomes for Patients and Their Caregivers.™

Een buitengewoon efficiënt bed dat zorgt dat u zich geheel kunt richten op de zorg voor de patiënt.

Met meer dan 80 jaar ervaring in het ontwerpen van ziekenhuisbedden begrijpen wij dat de kwaliteit van de patiënten zorg afhankelijk is van de tijd die u hier aan kunt besteden. Het Hill-Rom® 900-bed combineert een maximale functionaliteit met een eenvoudig gebruik, zodat u minder tijd en energie besteedt aan het bedienen van het bed. Zo heeft u meer tijd om u te richten op essentiële taken zoals het mobiliseren van uw patiënten en het zorgdragen voor hun veiligheid.



Bespaar tijd dankzij de intuïtieve bedieningen die gemakkelijk bereikbaar zijn.



Bespaar tijd en gedoe in krappe ruimtes met beddekken die slechts 4 cm ruimte nodig hebben — 1/3 van de ruimte van vergelijkbare ziekenhuisbedden¹.



Minder inspanning bij het verrijden van het bed door het centrale 5^e wiel.

- Het bed moeiteloos een bocht om sturen.
- In- en uitschakelen kan vanaf de kant waar men duwt, zodat er tijd wordt bespaard.

A healthcare professional is shown from the side, operating a Hill-Rom 900 hospital bed. The patient is lying in the bed, which is tilted. The professional's hand is on a control panel on the side of the bed. The control panel has several buttons and a joystick, with icons representing different bed functions. The bed is white with blue accents. The background shows a window with a view of the outdoors.

Meer dan 90%
van de zorgverleners
beoordeelde het
Hill-Rom® 900-bed
als eenvoudig
te gebruiken.²

Verminder
de dagelijkse
inspanning
met 200 kg.³

**Bespaar tientallen malen
per dag tijd en moeite.**

Laat met één hand en met
één handeling het bedhek
neer zonder uw patiënt te storen.

Intuïtieve mobiliteit bevordert de autonomie en revalidatie van de patiënt.

Een vroege en frequente patiëntmobilisatie bevordert het herstel van de patiënt⁴, maar is voor verpleegkundigen en patiënten vaak moeilijk uitvoerbaar en riskant⁵. De unieke functies van het Hill-Rom® 900-bed helpen u om uw patiënt eenvoudig, veilig en moeiteloos door de verschillende stadia van mobiliteit te begeleiden — van draaien en “rechtop in een stoel zitten” tot staan en uit bed stappen.

Bevordert de deelname van de patiënt aan het mobiliseren — zoals repositioneren in bed en op de zij draaien.



Mobiliseer patiënten vroeg, veilig en gemakkelijk met de one-touch EasyChair®-functie.



Voorkom de tijd en inspanning die nodig is om uw patiënt op de rand van het bed te laten zitten. Met de one-touch uitstapstand en het optimale design van het bedhek kunt u de patiënt altijd op de juiste manier positioneren.





Veiliger mobiliseren


De bedhekken met de geïntegreerde Care Grip-handgreep geven patiënten een stevige, stabiele steun terwijl u ze helpt te gaan staan of in een stoel te gaan zitten. Het resultaat: minder kans op vallen voor patiënten, minder inspanning voor zorgverleners en een groter vertrouwen voor beiden.

Bepaal
de veiligste stand
in een oogopslag.



Bed laag

Met een enkele aanraking kunt u de vlakke stand-functie gebruiken om het bed vanuit elke positie in de laagste en meest vlakke stand te zetten – minder dan 39 cm boven de vloer.

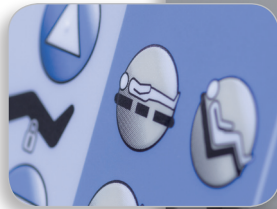

Intelligent nachtlampje

In een oogopslag ziet u of het bed in de veiligste slaapstand staat – zelfs van buiten de kamer van de patiënt.

Het nachtlampje brandt groen als het bed in de laagste stand staat. Het verlicht ook de vloer op de plaats waar de patiënt uit bed stapt zodat er minder kans is op vallen.

Als het bed hoger staat dan de laagste stand brandt het nachtlampje oranje. Daarnaast wordt de zorgverlener gewaarschuwd door een waarschuwingslampje op het bedieningspaneel.

Remmen ingeschakeld

Het rem-los-alarm waarschuwt u als de remmen niet goed zijn ingeschakeld.



Veilige zijkanten

De bekhekken ondersteunen patiënten die in staat zijn zelfstandig uit bed te stappen.

Het Hill-Rom® 900-bed is gecertificeerd volgens de EN 60601-2-52 norm voor ziekenhuisbedden, hetgeen betekent dat de kans dat de patiënt bekneld raakt geminimaliseerd is, zelfs als het bed verlengd is.





Uw patiënten vertrouwen op de kwaliteit van uw zorg. U kunt vertrouwen op de kwaliteitsproducten van Hill-Rom®. Het Hill-Rom® 900-bed wordt in het gecertificeerde testlaboratorium van Hill-Rom veel zwaarder getest dan de regelgeving vereist - het is gebouwd voor een lange levensduur.

In totaal wordt er een cumulatieve belasting van meer dan 14M kg⁶ op het bed uitgeoefend, meer dan 6 maal wat nodig is volgens de norm EN 60601-2-52 (2010). U kunt erop vertrouwen dat dit bed gedurende de gehele gebruiksduur betrouwbaar zal werken. Met het juiste onderhoud blijft het veilig voor uw patiënten en zorgverleners.

1. Vergelijking uitgevoerd met twee bedden van verschillende fabrikanten, waarbij de afstand van de buitenrand van het bedhek tot het frame in de bovenste stand ende tussenstand werd gemeten.
2. DJS Research, HR900 customer satisfaction survey, November 2011.
3. Om het bedhek neer te laten laat u hem eenvoudigweg vallen. U hoeft het bedhek niet handmatig neer te laten. Vermenigvuldigd met het aantal keer dat een zorgverlener de beddekken neerlaat betekent dat meer dan 200 kg aan dagelijks vermeden inspanning.
4. Markey, DW, Brown RJ, An interdisciplinary approach to addressing patient activity and mobility in the medical-surgical patient., Journal of Nursing Care Quality, 2002 Jul;16(4):1-12.
5. Flanders SA, Harrington L, Fowler RJ. Falls and Patient Mobility in Critical Care: Keeping patients and staff safe. AACN Adv Crit Care. 2009; 20(3): 267-276.
6. De cumulatieve belasting is de belasting in kg, vermenigvuldigd met het aantal cycli zoals gedefinieerd in elk testprotocol.

Hill-Rom en Design en het Hill-Rom woordmerk zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Hill-Rom Services, Inc. EasyChair is een handelsmerk of gedeponerd handelsmerk van Hill-Rom Services, Inc.

Getest volgens Hill-Rom.-normen



Enhancing Outcomes for Patients and Their Caregivers.™

France +33 (0)2 97 50 92 12
 United Kingdom +44 (0)1530 411000
 Deutschland +49 (0)211 16450-0
 Nederland +31 (0)347 32 35 32
 Italia +39 (0)2 950541
 Suisse/Schweiz +41 (0)21 706 21 30
 (deutschsprachig) +41 (0)21 706 21 38

Österreich +43 (0)2243 28550
 Ireland +353 (0)1 413 6005
 Iberia +34 (0)93 6856000
 Nordic Countries +46 (0) 20 78 10 30
 Export Contact your local Hill-Rom® distributor or contact your Area Manager via website or call +1 812 934 8173

www.hill-rom.com

Hill-Rom® behoudt zich het recht voor om design, specificaties en modellen zonder aankondiging te wijzigen. Hill-Rom® biedt uitsluitend de uitdrukkelijke schriftelijke garantie bij de verkoop of huur van producten.
 © 2012 Hill-Rom® SARL, ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN