



TechniCare
Improving Healthcare

Crib Cosy

Voor de ultieme verbinding
tussen mama en baby



Binding tussen mama en baby

Na de bevalling is het voor de moeder uiteraard wenselijk om zo dicht mogelijk bij haar eigen pasgeborene te zijn. Helaas is dat in de praktijk nog niet zo makkelijk, omdat de pasgeborene in het eigen wiegje ligt en de moeder daar vaak niet bij kan. Zeker met de keizersnede leidt dit tot emotionele situaties.

Waarom is binding zo belangrijk?

Onderzoek naar kangoeroezorg laat zien hoe belangrijk nabijheid en huid-op-huidcontact zijn voor de band tussen ouder en baby. De Crib Cosy ondersteunt die nabijheid door de baby dicht bij de moeder te positioneren, met de wieg over het bed en de zijwand onder het matras.

Bron: Strong Babies – Kangoeroezorg

Zelfstandigheid voor de mama en gemak in de zorg

De Crib Cosy kan over het bed geschoven worden

De Crib Cosy wordt over het ziekenhuisbed geplaatst. Hierdoor is de baby binnen bereik van de moeder. Daarbij kunnen de wandjes van de wieg onder het matras geschoven worden. Hierdoor bereikt de moeder haar kindje zelfstandig. Zo focust het zorgpersoneel zich meer op de zorgtaak.

In hoogte verstelbaar

Met het voetpedaal stelt het zorgpersoneel de wieg eenvoudig op de gewenste werkhoogte in. Zo bent u zeker van een correcte en juiste werkhouding.



“Het was heel fijn dat ik na de keizersnee zelf in staat was om op elk moment mijn dochter te kunnen pakken!”

- Sarah Vanhoegaerden





Ontwikkeld samen met de zorg

De Crib Cosy is samen met Erasmus MC ontwikkeld vanuit de wens om moeder en baby in de eerste uren na de geboorte dicht bij elkaar te brengen.

Reiniging

De Crib Cosy is eenvoudig te reinigen en geschikt voor gebruik met desinfectiemiddelen. Dit is uitgebreid getest door de afdeling infectiepreventie.

Accessoires

De Crib Cosy is uit te breiden met praktische accessoires die aansluiten op de wensen van de afdeling en de dagelijkse zorg.



Houder geboortekaartje



Opbergmandje



Matras




DIN-rail



Anti-trendelenburg



Wielen 100mm

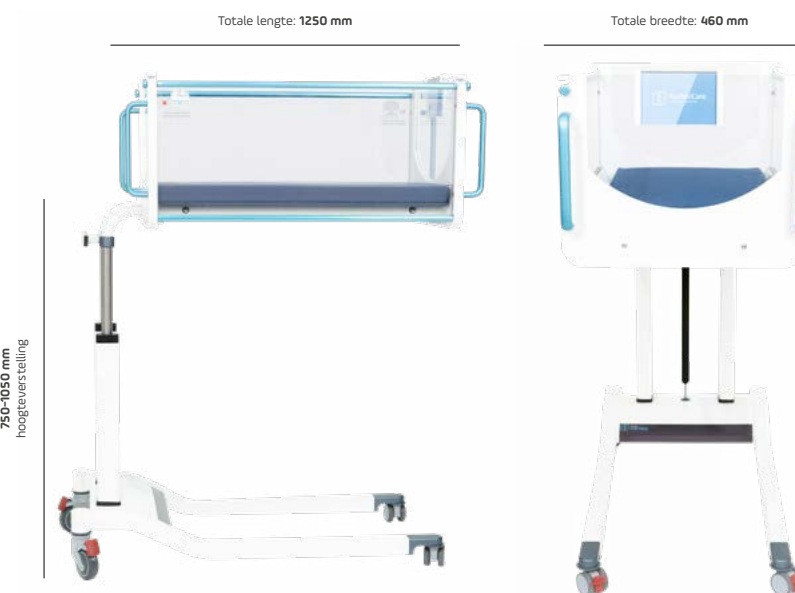

Gebruikte materialen

Framedelen:	Geanodiseerd/gepoedercoat of verzinkt RVS en aluminium
Matras:	Koudschuim met INCA-incontinentiemateriaal
Transparante delen:	polycarbonaat
Wielen:	TENTE

Afmetingen matras

Lengte:	675 mm
Breedte:	350 mm
Dikte:	40 mm

Improving Healthcare

TechniCare heeft de ambitie de zorg te verbeteren door het leveren van technische innovatie.

TechniCare levert hoogwaardige kwaliteit producten, ontwikkeld in samenwerking met de eindgebruiker.

We zijn een Nederlands bedrijf met eigen ontwikkel- en productiefaciliteiten. Voor meer informatie:

www.technicare.nl



Nikkelstraat 24
2984 AM Ridderkerk

T +31 (0)85 0870 421
info@technicare.nl

www.technicare.nl