



Techniek voor zorg,  
zorg voor techniek.



anesthesie en beademing


# Tappa Siliconen DLT

## Soepele siliconen dubbel lumen tubes

De siliconen endotracheale dubbel lumen tubes (DLT's) worden ingezet bij operaties waarbij longisolatie essentieel is. Tappa heeft een siliconen DLT ontwikkeld. Deze is zachter en soepeler waardoor het inbrengen patiëntvriendelijker is. Na de ingreep heeft de patiënt minder last hebt van keelpijn, heesheid en slikproblemen.

Het uiteinde en de tip van de tube is zacht en met staaldraad versterkt. Hierdoor is er minder kans op knikken tijdens het positioneren in combinatie met röntgen.

De endobronchiale cuff is blauw van kleur voor een betere visualisatie tijdens fiberoptische bronchoscopie. Deze tubes zijn gebogen om de geleiding naar de rechter of linker hoofdstambronchus te vereenvoudigen. Vanwege de anatomische verschillen tussen de linker- en rechterlong, is er voor beiden kanten een DLT beschikbaar. Uiteraard zijn deze verschillende DLT's makkelijk van elkaar te onderscheiden.

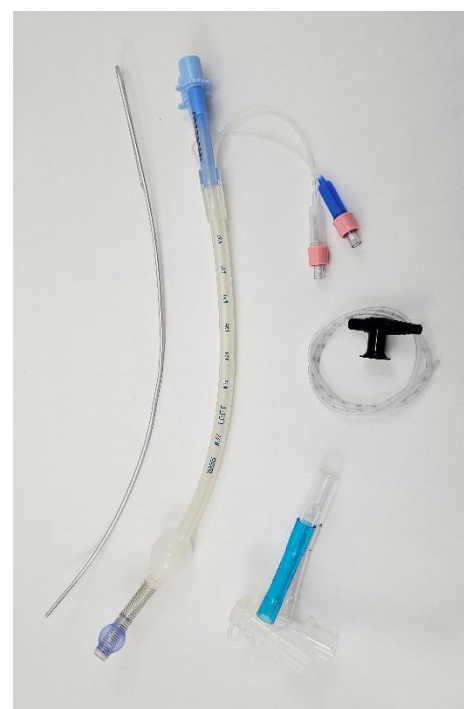

- / Patiëntvriendelijke siliconen DLT
- / Zacht uiteinde van de tube, versterkt met staal
- / Met "high volume and low pressure" siliconen cuff
- / Geleverd met intubatiestilet, zuigslang en connectoren
- / Leverbaar in de maten: 32fr, 35fr, 37fr en 39fr