

Flexicare® Urimeter

Duurzaam gesloten 2-delig urineopvangsysteem; voor de opvang van urine en het meten van urineproductie bij postoperatieve patiënten of ernstig zieke mensen, waarbij bewaking van de urineproductie noodzakelijk is.

2-delig systeem

Het gesloten urineopvangsysteem wordt aangesloten op een katheter en bestaat uit 2 delen; een geïntegreerd meetgedeelte en een urineopvangzak en heeft een knikvrije aansluitslang van 150cm, met een belucht ventiel en een naadloze monsterafnamepoort.

Nauwkeurig aflezen van kleine volumes

Het meetgedeelte bevindt zich bovenaan het systeem en heeft 3 kamers wat nauwkeurig aflezen van zelfs kleine volumes mogelijk maakt.


Verder heeft het meetgedeelte:

- Een terugslagklep, die voorkomt dat urine terugvloeit en mogelijk een infectie veroorzaakt
- Een schaalverdeling tot 500ml om de hoeveelheid urine af te lezen
- Een ontgrendelkraan (180°) om de urine uit het meetgedeelte door te sluisen naar de onderliggende urineopvangzak.

Compleet systeem

De urineopvangzak is door middel van de ontgrendelkraan aan het bovenliggende meetgedeelte gekoppeld en heeft een aftapkraan voor het legen van de opvangzak en een schaalverdeling tot 2000ml.

De aftapkraan bevindt zich op de urineopvangzak, waardoor contact met de vloer en per ongeluk openen wordt voorkomen. Het urineopvangsysteem is voorzien van een geïntegreerde bedhanger en riemen en past aan de meeste bedframes.

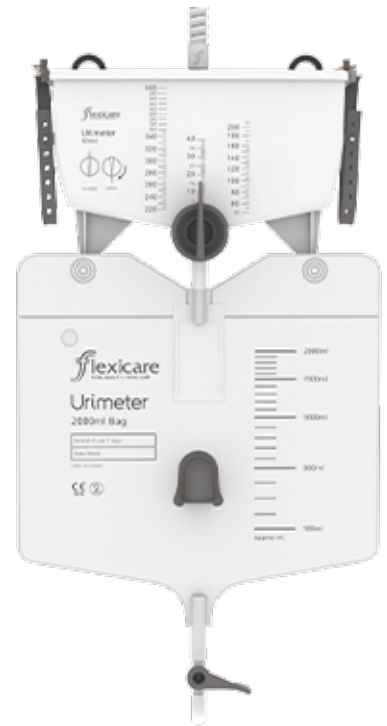

Flexicare® urimeter

Artikelcode	Z-Index	Omschrijving	Verpakking
1227	16599659	Flexicare Urimeter 500 ml. - 150 cm. slang	1 stuk