


Suture Strip® Plus dynamische hechtstrip

géén trekblaren of allergische reacties!

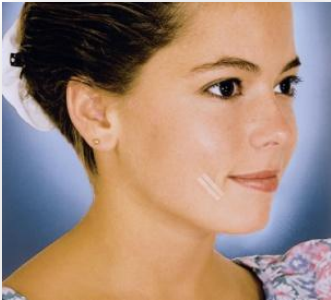

*"De Suture Strip® Plus is ideaal voor een non-invasieve en snelle wondsluiting. Het is de perfecte oplossing bij plastische chirurgie wanneer **esthetische resultaten** belangrijk zijn".*

Het gebruik van hechtstrips in plaats van hechtdraden vermindert de kans op littekenvorming en infecties. De meeste hechtstrips zijn microporeuze tapes die al dan niet met vezels zijn versterkt. Zij volgen echter niet de bewegingen van de huid bij strekken of oedeem-vorming. De krachten die zo ontstaan worden overgebracht op de uiteinden van de hechtstrips met trekblaren of ontvellingen als gevolg.




Suture Strip® Plus is de flexibele hechtstrip die zeer sterk fixeert maar tevens het vermogen heeft om 'mee te rekken' met de huid. Zo worden **trekblaren** of ontvellingen **voorkomen**. De **Suture Strip® Plus** is gemaakt van een macroporeuze non-woven polyamide met een speciale huidvriendelijke kleeflaag. Daardoor ontstaat een perfecte balans tussen elasticiteit en hechtcracht waarbij de dynamiek van de huid optimaal wordt gevolgd. **Suture Strip® Plus** is waterbestendig en latexvrij.



Vergelijk zelf met de 'strektest'

1. Breng de **Suture Strip® Plus** en de hechtstrip die u nu gebruikt in lengterichting op uw wijs- en middelvinger aan (zoals afgebeeld).
2. Maak nu langzaam een vuist. Let u op de superieure hechting van de **Suture Strip® Plus** en de maximale flexibiliteit waardoor trekblaren en ontvellingen worden voorkomen.

Suture Strip® Plus

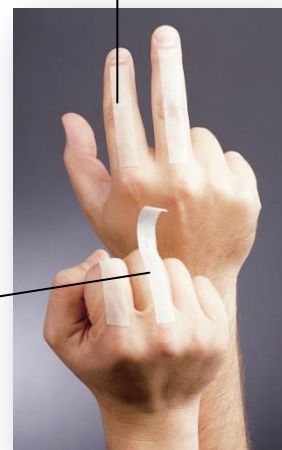


anderen


✓ **Suture Strip® Plus** hechtstrips zijn **gunstig geprijsd** en leiden tot flinke **kostenbesparingen!**

Suture Strip® Plus verpakking- en bestelinformatie

Suture Strip® Plus TP1105 | 25 mm x 125 mm
4 strips/pouch
25 pouches/box
4 box/case

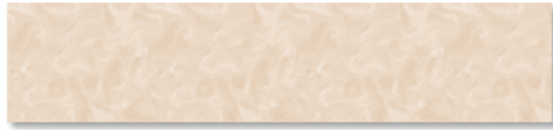


Suture Strip® Plus TP1103 | 12 mm x 102 mm
6 strips/pouch
50 pouches/box
4 box/case

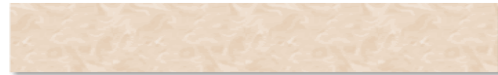

Suture Strip® Plus TP1102 | 6 mm x 102 mm
10 strips/pouch
50 pouches/box
4 box/case



Suture Strip® Plus TP1101 | 6 mm x 76 mm
3 strips/pouch
50 pouches/box
4 box/case

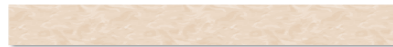

Suture Strip® Plus TP1100 | 3 mm x 76 mm
5 strips/pouch
50 pouches/box
4 box/case



Suture Strip® Plus TP1104 | 6 mm x 38 mm
6 strips/pouch
50 pouches/box
4 box/case

